



ISO 9001, 13485, 14001 인증기업



# 사용설명서



이 제품은 의료기기이며,  
사용상의 주의사항과 사용방법을  
잘 읽고 사용하십시오.

- ZAM-01
- ZAM-02
- ZAM-03



- ♣ 읽고 난 뒤에는 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주십시오.
- ♣ 사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.
- ♣ 주의 : 제품을 고장없이 오래 사용하시려면 사용설명서를 꼭 읽어 주십시오.

ZAM-KM604 (Rev. 4) 2016년10월



(주) 웰뷰텍

# 1. 차례

본 제품을 애용해 주셔서 감사합니다.  
사용설명서를 읽고 사용하시면 훨씬 편리하며,  
안전 합니다.

1. 차례	2
2. 안전을 위한 경고	3
3. 사용전 알아두기	5
4. 각 부분의 명칭 및 설명	6
5. 사용방법	8
6. 보관 및 관리방법	12
7. 고장시 확인사항	13
8. A/S 및 제품보증	14

본 기기는 사지압박순환장치로, 혈액이 고이는 것을 방지하거나 혈액 순환이 잘 되도록 주기적으로 슬리브 등을 부풀려 사지를 압박해주는 의료기기입니다.

## 2. 안전을 위한 경고

사용전에 안전하게 사용하는 방법과 주의사항을 잘 읽어 보신 후 바르게 사용하여 주십시오.

본 사용설명서는 항상 볼 수 있는 위치에 놓아 보시면서 사용할 수 있도록 해주십시오.

본 사용설명서는 사용자의 안전을 지키고, 사용자 이외 다른사람을 위해나 재산의 손해 등을 막기위한 중요한 내용입니다.

경고 및 주의사항을 지키지 않아 발생된 사고에 대해서는 판매 및 제조회사에서는 책임을 지지 않습니다.

그림기호



※경고(강제, 금지)  
취급부주의로 사람이 사망, 중상을 입을 가능성을 상정한 경우

※주의  
취급부주의로 인체의 상해, 물적 손해의 발생 가능성을 상정한 경우

### 1) 사용전의 주의사항

#### 강제

※다음과 같은 분은 필히 의사와 상담 후 사용하여 주십시오.




- 의사의 치료를 받고 있는 사람, 특히 신체에 이상을 느끼고 있는 사람
- 악성종양이 있는 사람
- 심장장애가 있는 사람
- 안정을 필요로 하는 사람
- 과거에 사고나 질병등으로 척추에 이상이 있는 사람 또는 척추가 굽어 있는 사람
- 이전에 치료를 받은 곳 또는 질환부위에 사용하는 사람
- 몸이 자주 붓거나 열이 높은 사람
- 고관절 등에 질환이 있는 사람
- 종아리에 상처가 있는 사람
- 피부관련 질환이 있는 사람
- 종아리, 허벅지 근육경련이 잦은 사람
- 정신질환이 있는 사람
- 신장질환이 있는 사람
- 골다공증, 하지정맥류 이상이 있는 사람

#### 금지




- 본 사용설명서의 사용법 이외의 사용을 금하여 주십시오.
- 본기기와 함께 다른 치료기나 전기모포 등을 사용하지 마십시오.
- 전원코드 위에 무거운 물건을 올리거나 전원코드를 본기기의 밑에 깔고 사용하지 말아 주십시오. (전원코드가 파손되어 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.)
- 천이나 플라스틱 커버를 제거하지 마십시오. 제품내부에 닿으면 감전 및 화상의 우려가 있습니다.
- 제품을 높은 곳에서 떨어뜨리지 마십시오.
- 전원코드 또는 전원플러그가 파손되거나, 콘센트가 헐거울때는 사용하지 마십시오. (감전, 쇼크, 화재의 원인이 됩니다.)
- 제품을 물이나 기타 액체에 절대로 담그지 마십시오.
- 목욕탕, 습기가 많은 곳에서 사용하지 마십시오.
- 1회 15분 이내, 2회 이상 연속 사용하지 마십시오.
- 하루 3회 이내로 사용을 제한하여 주십시오.
- 상온이하에서 제품을 사용 할 경우 작동이 원활하지 않을 경우가 있으니 상온에서 2시간 이상 보관 후 사용하여 주십시오.

# 안전을 위한 경고

## 2) 사용시의 주의사항

 <b>강제</b>	 <b>금지</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 어린이 또는 의사표시가 불가능한 사람은 절대 사용하지 마십시오.</li> <li>• 본 기기 사용중에는 어린이 및 애완동물이 가까이 오지 않게 하여 주십시오.</li> <li>• 인체용 이외에는 사용하지 마십시오.</li> <li>• 폭발의 위험이 있거나 가연성 액체, 가스근처에서 사용하지 말아 주십시오.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 실수로 본 기기에 물이 닿거나 몸에 상처가 났을 경우에는 즉시 전원스위치를 끄고 전원플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.</li> <li>• 사용중에는 커프를 열지 마십시오. (반드시 동작을 멈추거나 전원을 끄십시오)</li> <li>• 부츠에 연결되어 있는 에어호스를 꺾거나 자르지 마십시오.</li> <li>• 기기가 파손되어 내부가 노출 되었을때는 사용을 중지하고, 전원플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오.</li> <li>• 전원코드를 강하게 잡아 당기지 마십시오. 코드를 잡아 당기면 코드가 파손, 화재, 고장의 원인이 되는 수가 있습니다.</li> <li>• 젖은 손으로 전원플러그를 뽑지 마십시오. 감전, 고장의 원인이 됩니다.</li> <li>• 전원플러그를 뽑을 경우에는 필히 전원 플러그 손잡이를 잡고 뽑아 주십시오.</li> <li>• 사용을 중지할 경우 전원스위치는 필히 OFF로 하여 주십시오.</li> </ul>
 <b>금지</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 고객이 직접 개조, 분해, 수리를 하지 말아 주십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다. (제품을 임의로 분해 또는 조립하지 마십시오)</li> <li>• 제품사용 중 다리에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 인체의 상태 또는 제품 고장의 원인이 됩니다.</li> <li>• 제품사용 중 과도한 충격을 가하지 마십시오.</li> </ul>	

## 3) 기타 주의사항

 <b>강제</b>	 <b>금지</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 다른사람에게 양도 또는 대여시 본기와 함께 사용설명서를 첨부하여 주십시오.</li> <li>• 본 제품은 공공장소에서 여러사람이 사용하는 제품이 아닙니다. (본 제품을 공공장소에서 여러사람이 사용했을경우 발생하는 모든 책임은 사용자에게 있으며, 제품 고장시 A/S가 유상처리되며 교환반품이 불가합니다.)</li> <li>• 본 제품의 소음은 주위가 조용한 곳에서는 다소 크게 들릴 수 있으나 고장이 아니므로 안심하고 사용하기 바랍니다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용설명서의 사용법 이외의 사용을 절대 금하여 주십시오.</li> <li>• 효과적인 사용시간은 1회 15분 사용 및 하루 3회 이내이며 규정치 이상의 무리한 사용 및 맨살에서의 사용은 철과상, 명, 통증등의 우려가 있습니다.</li> <li>• 노약자 및 어린이, 임산부는 사용시 무리한 힘이 가해질수도 있으므로 사용자 주의하여 주시기 바랍니다.</li> <li>• 사용전에 안전상의 주의사항을 반드시 읽고 사용하십시오.</li> </ul>
 <b>주의</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 기기위에 무거운 물건을 올려 놓지 마십시오.</li> <li>• 어린이의 장난 등 안전 사고방지를 위하여 사용하지 않을때는 반드시 전원을 꺼 주십시오.</li> <li>• 장시간 사용하지 않을때는 콘센트에서 전원플러그를 뽑아 주십시오.</li> <li>• 오염이나 먼지를 제거한 후 습기가 적은 곳에 정리, 보관하여 주십시오.</li> <li>• 제품을 높은 곳에서 떨어뜨리지 마십시오.</li> <li>• 제품 사용 후 보관중 뽀족하거나 날카로운 물건에 닿지 않도록 주의해 주십시오.</li> </ul>	

# 3. 사용전 알아보기

## 1) 개봉

포장 상태에서 제품을 조심스럽게 꺼낸 후 다음 사항을 확인 합니다.

- 제품에 손상이 있는지 꼼꼼히 점검합니다.
- 빠진 부속품이 있는지 확인 합니다.
- 제품에 손상이 있거나 빠진 부속품이 있다면 구입한 곳이나 판매점에 연락하십시오.

## 2) 사용전 알아보기

- 사용하기 전 반드시 사용설명서를 읽어 보신 후 사용하시고, 용도 이외의 사용을 절대 금하여 주십시오.
- 이미 의사의 치료를 받고 있을 때는 의사와 상담 후 사용하십시오.
- 제품 사용 압력은 0~265(±30)mmHg로 조절하여 사용할 수 있습니다. 사용 전에 압력 조절 다이얼의 압력표시 위치를 확인하십시오.
- 본 제품을 처음 사용시에는 모든 기능을 약단계로 맞춰서 시작하시고, 차츰 압력과 사용 시간을 조절해야 합니다.
- 사용 전에 발찌 등의 액세서리를 빼주시고, 커프에 송곳이나 바늘 등의 날카로운 물체가 닿지 않도록 주의하십시오. (의류에 단추 등의 액세서리가 있는 경우도 포함)
- 피부에 직접 커프가 닿지 않도록 얇은 옷을 입거나 수건 등을 덧대어 사용하십시오. (맨살에서의 사용을 삼가하여 주십시오.)
- 커프는 소모품입니다. (파손시 별도구매)

◆ 경고 및 주의사항을 지키지 않아 발생한 사고에 대해서는 판매 및 제조회사에서는 책임을 지지 않습니다.

- ◆ 사용목적: 혈액이 고이는 것을 방지하거나 혈액 순환을 위하여 주기적으로 슬리브 등을 부풀려 압박해주는 기구

## 3) 사용 준비

- 전원 사양을 확인합니다.
  - 전원플러그와 전원 위치를 확인 합니다.
  - 전원플러그를 콘센트에 꽂습니다.
- ◆ 호스를 본체에 연결하면 호스플러그 센서에 의해서 선택된 커프(다리/팔/허리)를 자동 인식하여 각 신체에 맞는 압력설정 값으로 마사지 합니다.

# 4. 각 부분의 명칭 및 설명

## 기본구성

본체

조작부



호스플러그 연결구

사용설명서



다리커프  
(일반형)



파우치



지압대(2개)



연결호스



## ■ 별매품


· 별도 구매해서 사용하실 수 있습니다.

· 커프는 소모품입니다. (파손시 별도구매) [ 문의처: 고객센터 (032) 8700-900 ]

허리커프set	팔커프set	확장커프A (Air 주입형)	확장커프B (2단계 조절)
허리커프+연결호스	팔커프+연결호스	확장커프A(2개)+전용호스	확장커프B(2개)
		 확장커프A 전용 에어호스 (다리용)	 (다리용)


# 각 부분의 명칭 및 설명

## 1) 조작부

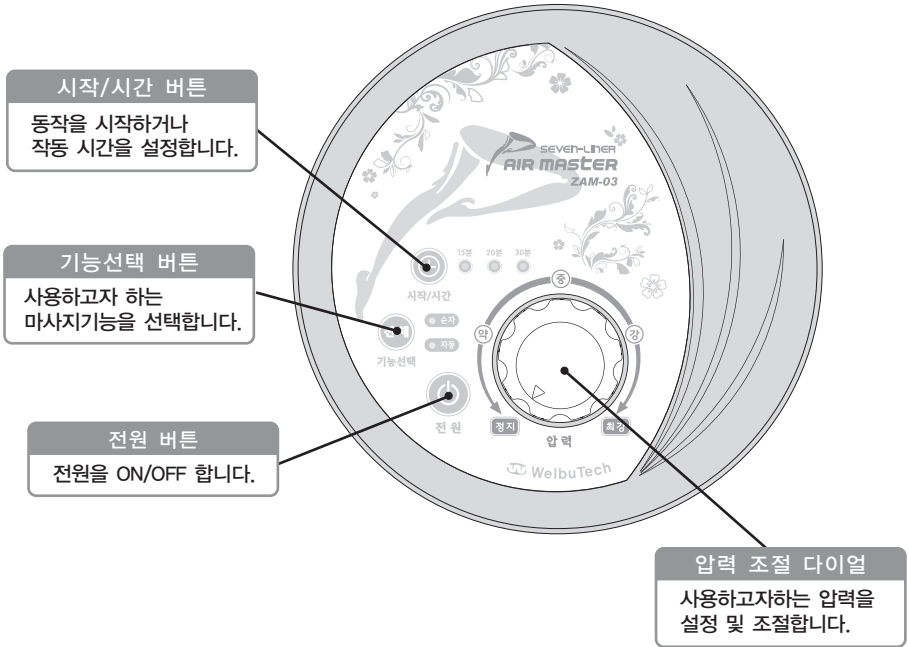

## 2) 호스플러그 연결구

- ◆ 동작 시작 전에 호스플러그를 꽂아 주십시오.  
호스플러그가 본체에 연결되어 있지 않거나, 사용 중 빠지게 되면 알람이 울립니다.
- ◆ 알람을 해제 하시려면 호스플러그를 꽂거나, 전원버튼을 눌러서 전원을 OFF시켜 주십시오.

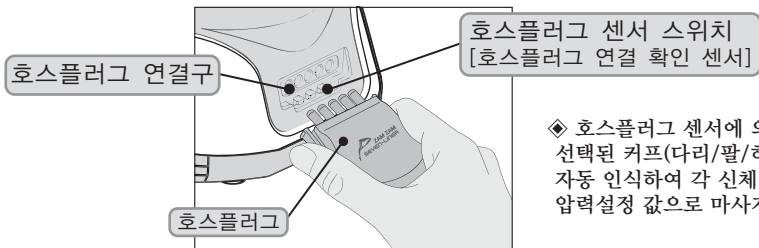



- ◆ 호스플러그 센서에 의해서 선택된 커프(다리/팔/허리)를 자동 인식하여 각 신체에 맞는 압력설정 값으로 마사지 합니다.

# 5. 사용방법

## 1 커프 착용

- 사용하고자 하는 부위의 커프를 선택(다리/팔/허리)하여 착용합니다.
- 커프의 호스 연결구에 호스를 연결합니다.

◆ 호스 연결구 색상을 동일하게 연결해야만 선택된 커프(다리/팔/허리)를 본체에서 자동 인식하여 각 신체에 맞는 압력설정 값으로 마사지 합니다.

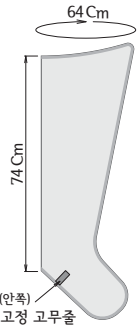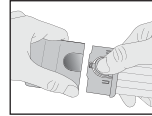

**다리커프**  
기본구성

- 다리커프를 사용하실 때는 다리를 편 상태로 사용하며, 구성품인 지압대를 사용하여 발바닥을 지압할 수 있습니다.
- 지퍼를 채우고 벨크로 테이프도 달아주십시오.
- 확장커프(별매품)를 이용하여 커프둘레를 확장할 수 있습니다.  
확장커프A : 약 10Cm 확장 (에어주입형)  
확장커프B : 약 6Cm, 12Cm 2단계로 확장
- 다리커프 안쪽 발바닥 부분의 고무줄을 이용하여 지압대를 고정하여 사용할 수 있습니다.



**팔커프**  
별매품

- 팔커프는 밴드를 이용하여 어깨를 충분히 감싸서 고정 시키십시오.
- 커프가 흘러 내리지 않도록 반드시 고정용 밴드를 이용하여 고정하여 주십시오.



**허리커프**  
별매품

- 호스가 몸의 왼쪽으로 오게 착용합니다.
- 허리커프는 허리와 엉덩이를 걸쳐서 감싸서 고정 시키십시오.

**잠깐!**


- 사용 전에 반지, 팔찌, 발찌, 시계 등의 액세서리를 빼 주세요. (의류에 단추등의 액세서리가 있는 경우도 포함)
- 피부가 약하거나 민감하신 분은 피부에 손상을 줄 수 있으니 맨살에 직접 사용을 금합니다.
- 반드시 얇은 옷을 걸치거나, 수건 등을 덧대어 사용하십시오.

· 팔커프 및 허리커프, 확장커프는 기본구성품이 아닙니다. 별도 구매하셔서 사용하실 수 있습니다.  
[문의처: 웰뷰텍 고객센터 (032) 8700-900]



# 사용 방법

## 2 호스플러그 연결

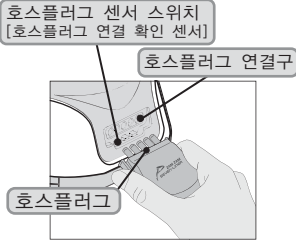

- 본체의 호스플러그 연결구에 호스플러그를 연결합니다.
- 호스플러그가 센서 스위치를 누를 수 있도록, 호스플러그를 본체 쪽으로 끝까지 밀어서 끼워 주십시오.
- 호스플러그 센서 스위치가 있어서 호스플러그가 빠지거나, 연결되어 있지 않으면 알람이 울리며, 동작이 되지 않습니다.
- 알람을 해제 하시려면 호스플러그를 꽂거나, 전원버튼을 눌러서 전원을 OFF시켜 주십시오.

## 3 전원플러그 연결

- 전원플러그를 AC 220V 콘센트에 꽂습니다.

## 4 전원 ON



- 전원 버튼을 눌러서 기기의 전원을 ON 시킵니다.



시작/시간

**기본 설정대로 바로 마사지가길 원하시면  
전원 ON 상태에서 시작/시간버튼을 누르세요!**

\* 기본 설정은 15분동안 전체마사지 모드로 세팅되어 있습니다.

## 5 시작/시간 (타이머 기능)



- 시작/시간 버튼을 눌러 마사지를 시작합니다.
- 기본설정은 15분이며, 시작/시간 버튼을 눌러서 사용시간을 15분/20분/30분 중에 선택할 수 있습니다.
- 사용하다가 잠이 들어도 정해진 시간 동안 작동 후에 자동으로 꺼지므로 안전합니다. (타이머 기능)
- 동작 중에도 조작부의 버튼으로 시간 / 압력 / 기능 설정을 변경할 수 있습니다.

# 사용 방법

## 6 기능 선택 (마사지 설정)



- 사용하고자 하는 마사지 기능을 선택합니다.
- 동작 중에도 전체버튼을 눌러서 마사지 모드를 변경할 수 있습니다.
- 기본 설정은 전체마사지 모드로 세팅되어 있습니다.

전체마사지	순차마사지	순환마사지
· 자동마사지는 순차/순환마사지를 자동 반복 마사지합니다.		

	ZAM-01	ZAM-02	ZAM-03
기능	2가지	3가지	3가지
	전체 순차	전체 순차 순환	전체 순차 자동
전체마사지 중에는 순차/순환, 순차/자동 2개의 램프가 켜집니다.			

### ※ 가압 순서/가압방향

**다리커프 기본구성** · 발 → 종아리 → 무릎 → 허벅지

**팔커프 별매품** · 손 → 팔꿈치 → 어깨


**허리커프 별매품** · 상복부 → 하복부 → 등·허리

· 팔커프 및 허리커프는 기본구성품이 아닙니다. 별도 구매하셔서 사용하실 수 있습니다.

[문의처: 웰뷰텍 고객센터 (032) 8700-900]

# 사용 방법

## 7 압력 설정 (강·약조절)

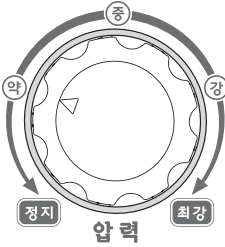

- 압력 조절 다이얼을 좌측으로 돌리면 압력이 약해지고, 우측으로 돌리면 압력이 강해집니다.
- 사용 압력은 처음 낮은 단계에서 사용하다가 차츰 높여가십시오.



### 주의

- 에어호스가 꺾이거나 꼬이지 않게 주의하시고, 사용 중에 압력이 약하다고 느껴지면 에어호스 플러그 연결을 확인하십시오.
- 사용 전에 반드시 압력 조절 다이얼의 압력표시 위치를 확인하십시오.
- \* 압력 조절 다이얼의 압력표시 위치가 **정지**에 있으면 동작하지 않습니다.
  - 압력 조절 다이얼을 우측으로 돌려 사용하고자 하는 압력을 설정하십시오.
- \* 사용 중에 동작을 정지하려면 압력 조절 다이얼을 **정지**에 놓으십시오.
  - 커프의 에어가 빠지고 동작이 멈춥니다. (시간 불빛이 깜빡입니다.)
- \* 압력 및 시간을 무리하게 설정하여 사용시 멍, 통증의 우려가 있으므로 사용자 신체 특성에 따라 적정 압력 및 시간으로 사용하십시오.

## 8 사용이 끝난 후

- 설정된 동작 시간이 되면 자동으로 커프의 에어가 빠지고 전원이 OFF 됩니다.
- 본체에서 호스플러그를 분리하십시오.
- 커프를 벗고 콘센트에서 전원플러그를 분리하십시오.

## 6. 보관 및 관리방법

### 1) 보관방법

- 장시간 사용하지 않을 경우에는 전원플러그를 뽑은 후 실온에서 보관하십시오.
- 오염이나 먼지를 제거한 후 습기가 적은 곳에 정리, 보관하여 주십시오.
- 장시간 사용하지 않을 때는 커버 등을 씌워 먼지가 끼지 않게 보관하십시오.
- 본체와 기타 부속품을 분리하여 보관하십시오.
- 직사광선이 매일 장시간 닿는 곳, 열기구(스토브) 등이 가까이 있어서 고온이 되는 장소에는 보관하지 마십시오.

### 2) 손질방법

- 손질 전에는 필히 전원스위치를 끄고 전원플러그를 콘센트에서 빼 주십시오.
- 플라스틱 부분의 오염은 중성세제를 묻혀 꼭 짠 천으로 닦아내시고 세제가 남지 않게 마른 천으로 잘 닦아내고 건조 후 사용하여 주십시오.
- 기타 부속품은 세탁기 등을 이용하여 세척하지 마십시오.
- 전자부품으로 구성된 부분은 물을 이용하여 세척하지 마십시오.

### 3) 주의사항

- 본체나 부속품을 물에 젖은 천으로 닦거나 물로 씻지 마십시오.
- 본체나 부속품 세척시 광약이나 용제류 사용은 변색, 흠집 및 크랙의 원인이 될 수 있으니 사용하지 마시고, 부득이할 경우 형겅에 약간의 알콜을 묻혀 닦은 후 마른 형겅으로 깨끗이 닦아 주십시오.
- 기타 세척제나 소독제 등을 사용하실 경우 공급자의 지시사항을 준수하여 주십시오.
- 전원코드 손상이나 교체시에는 고객센터에 문의하여 수리 받으십시오.

## 7. 고장시 확인사항

### 1) 제품이 작동하지 않을 때

- 전원플러그를 1회 뽑았다가 다시 연결하여 주십시오.
- 압력 조절 다이얼의 압력표시 위치를 확인하십시오.  
(시간 불빛이 깜빡이는지 확인하십시오.)
  - 압력 조절 다이얼의 압력표시 위치가 **정지**에 있으면 동작하지 않습니다.
  - ⇒ 압력 조절 다이얼을 우측으로 돌려 사용하고자 하는 압력을 설정하십시오.

### 2) 제품이 작동하나 원활하지 않을 때

- 전원 버튼을 1회 반복 ON/OFF 시켜 제품을 초기화 시켜 주십시오.
  - 실온 이하에서 장시간 보관시 일부 기능이 원활하지 않을 수 있습니다.
    - 실온에서 2시간 정도 보관 후 사용 하십시오.
  - 에어호스에 꺾인 부분이 있는지 확인하여 주십시오.
  - 에어가 새는 곳이 있는지 확인하십시오.
    - 동작시 다음과 같은 이유로 에어가 새는 부분이 있으면, 제품은 작동하나 그 부분의 가압이 충분치 않을 수 있습니다.
- 1) 컵에서 호스가 빠진 경우
    - ⇒ 빠진 호스를 컵의 호스 주입구에 꽂아 주십시오.
  - 2) 본체와 호스플러그를 잘못 연결한 경우
    - ⇒ 본체에 호스플러그를 제대로 끼워 주십시오.
  - 3) 컵의 호스연결구에서 호스가 빠진 경우
    - ⇒ 컵의 호스연결구에 호스를 잘 끼워 주십시오.
  - 4) 컵 또는 에어호스에서 에어가 새는 경우 등
    - ⇒ 고객센터에 문의하여 수리 후 사용하여 주십시오.
- 사용 중 정전기가 발생할 수 있으나 제품의 고장이 아니므로 안심하고 사용하여 주십시오.
  - 제품 사용 중 바람 빠지는 소리가 날 수도 있으나, 이는 사용자의 안전과 제품 파손을 방지하기 위한 안전장치이며 고장이 아닙니다.

### 3) 꽃음플러그 또는 전원코드선이 파손된 경우

- 고객센터에 문의하여 반드시 수리 후 사용하여 주십시오.

## 8. A/S 및 제품보증

### 1) 제품보증서(설명서 맨 뒷면에 첨부)

- 보증서 내 기재된 취급설명 및 보증내용을 잘 읽어 주십시오.
- 향후 A/S시 반드시 필요하오니 분실하지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
- 보증기간은 구입일로부터 1년입니다.
- 단, 커프는 소모품입니다. (파손시 별도구매)

### 2) 수리를 의뢰하실때

- 수리를 의뢰하시기 전에 사용설명서를 잘 읽어 주십시오.
- A/S 의뢰시 아래 사항을 확인하신 후 의뢰하여 주시기 바랍니다.
  - ① 이름, 주소, 전화번호    ② 제품명 및 모델번호
  - ③ 구입일자    ④ 고장상태(가능한 자세히)
- 보증기간 중에는 수리할 때 보증서를 제시하여 주십시오.  
보증기간 중에도 유상으로 되는 경우가 있으므로 보증서를 잘 읽어 주시기 바랍니다.
- 보증기간이 경과 하였을 경우 구입하신 판매점에 문의하여 주십시오.  
수리에 의하여 제품 기능이 유지되는 경우에는 소비자의 선택에 의해 수리되고 있습니다.

·본 제품은 소비자 보호법에 따라 구입일로부터 가산하여 품질보증기간(1년)이내에 정상적으로 사용한 상태에서 제품의 근본적인 하자로 인하여 발생한 고장에 대해서는 일체의 비용을 받지 않고 무상으로 수리하여 드립니다.

단, 보증기간이 경과하였거나, 보증기간 중이라도 다음과 같은 경우에는 수리에 필요한 실비를 청구하게 됩니다.

- 1.사용자의 고의 과실 및 취급 부주의로 인한 고장 및 손상
2. 천재,재해(화재, 연해, 가스재해, 지진, 풍수해, 낙뢰 및 기타)로 인한 손상
3. 부적절한 수리 및 개조에 의한 고장
4. 보증서의 제시가 없을때와 보증서의 기재사항이 잘못 기재 되었을때
5. 기타 고객 과실에 의한 고장 및 사용설명서 내에 안전상의 경고를 지키지 않아 고장이 발생한 경우

### 3) A/S에 대하여 명확하지 않은 점은

- 구입하신 판매점 또는 고객센터로 문의하여 주십시오.
- 제품 보증 기간은 구입일로부터 1년간 품질을 보증합니다. (커프 제외)  
(구입시 제품보증서 난의 빈칸을 기재하여 A/S시 불이익이 없도록 하십시오)
- 본 제품의 구입일자가 판매점에 의해 혹은 구입시의 영수증에 의해 확인되어야만 정상적인 품질보증품으로 인정됩니다.
- 본 제품은 철저한 품질관리와 검사를 거쳐서 제조, 유통되는 제품으로 제품보증서의 내용에 의하여 품질을 보증합니다.

# 제품보증서

제품명	사지압박순환장치		
모델명	ZAM-01 / ZAM-02 / ZAM-03		
구입일자	년	월	일
고객	성명		
	주소		
제조	상호	(주) 월부텍	
	주소	인천광역시 서구 백범로 677번길 14 (가좌동)	
고객센터	(주)월부텍 ☎ 032-8700-900 09:00~17:30까지 (토요일, 공휴일 제외)		

※ 제품 구입시 공란의 내용을 필히 기재하여 주십시오.

※ 본 제품은 철저한 품질관리와 검사를 거쳐서 제조, 유통되는 제품으로 상기 내용에 의하여 품질을 보증합니다.

## 의료기기 기재사항

제품명	사지압박순환장치	제조년월일	별도표기
형명	ZAM-01/ZAM-02/ZAM-03	제조번호	별도표기
품목허가번호	제허 13-752호	정격전압	AC 110~240V, 50/60Hz
중량,포장단위	1.5Kg(본체) / 1set	소비전력	60VA
제조사	(주)월부텍	성능및사용방법	사용설명서 참조
고객센터	(032) 8700-900	사용시주의사항	사용설명서 참조
주소	인천광역시 서구 백범로 677번길 14 (가좌동)		
사용목적	혈액이 고이는 것을 방지하거나 혈액 순환을 위하여 주기적으로 슬리브 등을 부풀려 압박해주는 기구		
전력에 대한 보호형식 및 정도	2급기기, B형기기		
※ 본 제품은 의료기기임.			



ISO 9001,13485,14001 인증기업



## 서비스 접수/상담

제품사용중 이상이 생겼거나 불편한점이 있으시면  
고객상담실로 문의하여 주십시오.

고객상담실 지역번호 (032)

**8700-900**

09:00~17:30

(토요일, 공휴일 제외)



제품모델명, 고장상태, 연락처등을 정확히 알려 주시면  
고객 여러분의 고충사항, 제안 및 건의내용을 언제나  
친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

생명가전의 시작  
**(주)웰뷰텍**

인천광역시 서구 백범로  
677번길 14 (가좌동)  
[www.welbu.com](http://www.welbu.com)

- 제품의 외관, 사양 등은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. ■ 제품의 색상은 인쇄과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다.
- 본 매뉴얼에 실린 모든 이미지 및 내용을 사전 승인 없이 불법 도용했을 경우, 저작권법에 의거 민형사상의 책임을 지게 되므로 무단 전재 및 복제를 금합니다.